⊪IAGE

Installation du préleveur



1- Ouvrir la valise



2- Connecter la batterie
!! Connectique rouge sur connecteur rouge !!


Réglages (programmation de vos prélèvements)

- L'écran s'allume sur l'écran d'accueil Si l'écran ne s'allume pas :
- · Vérifier que la batterie est bien chargée
- · Vérifier que les connecteurs soient bien branchés
- Vérifier les fusibles
- · Toucher l'écran pour entrer dans le menu principal
- Sélectionner les jours de prélèvements (surbrillance = jours sélectionnés)
- 3 Vous pouvez programmer 2 créneaux par jour maximum :
- Oliquer sur début pour définir l'heure du départ du prélèvement
- 5 Cliquer sur fin pour définir l'heure de fin de prélèvement

!! Sélectionner sur l'écran tactile avec votre sylet les heures et minutes correspondant à la plage de prélèvement souhaitée !!

⑤ Période de prélèvement: temps entre chaque prélèvement (cycle pour la durée du prélèvement sélectionné)

Votre prélèvement est enregistré

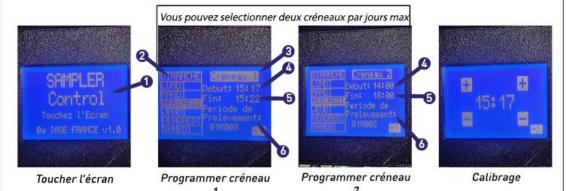


. ⊪IAGE

Menu Paramètre

- ① Tps(*) purge avant : nettoyage du tuyau et de la crépine (défaut: 5s tps conseillé pour économie de batterie : 0s)
- 2 Tps amorçage : amorçage de la pompe, dépend de la profondeur (défaut 1 min)
- 3 Tps de prélèvement: à définir selon la durée du créneau de prélèvement et le volume souhaité (débit de la pompe : 730ml / min)
- 5 STATS : nombre de prélèvements réalisés lors du dernier cycle

(*)Tps = Temps

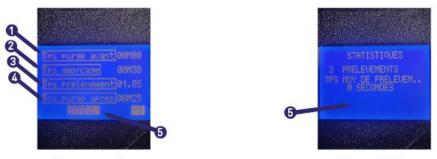

Menu paramètre

Ecran STATS.

Mode manuel

- Bouton d'allumage de la pompe (on/off)
- 2 Bouton de contrôle de la pompe : gauche / droite (aspiration / refoulement)

Le mode manuel peut être utiliser pour :

- Valider les temps d'amorçage, le temps de prélèvement ou les temps de purge avant et après,
- · Vérifier que la pompe fonctionne et prélève correctement

